

INSTRUCTIONS FOR USE

Intended Purpose

To transfer energy for defibrillation therapy to the heart and to provide CPR assistance/feedback.

Defibrillation Pads with CPR Device

Use Cardiac Science® defibrillation pads with the Powerheart® G5 AED for emergency treatment of sudden cardiac arrest. The AED automatically identifies electrode pads connected to it, and adjusts the maximum shock energy.



- For patients over 8 years of age or heavier than 55lbs (25kg)
- Intended for short-term use (<8hrs)
- Use before the expiration date listed on the package.
- The AED automatically reads the expiration date of the electrode pads, and notifies the user of expired pads.



WARNING! Do not reuse pads.
Reuse of pads may result in skin burns, improper AED performance, or patient-to-patient contamination.

DO NOT open until ready to use.

DO NOT use damaged pads.



Failure to remove blue plastic completely could impact therapy delivery. Before use, check cable and connectors for damage. DO NOT pull on the lead wires to separate the pads from the blue plastic.

Not intended for use in pacing.



When placing pads:
Place the pad at least an inch from any implanted device.
Ensure patient's skin is clean and dry before use.



Manufactured for:
ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105
www.zoll.com



ZOLL International Holding B.V.
Einsteinweg 8A
6662 PW Elst
Netherlands



ZOLL Medical
Switzerland AG
Baarerstrasse 8
6300 Zug, Switzerland



English

Patents pending.
For a complete list of U.S. and foreign patents,
see www.zoll.com/patents.



Not made with
natural rubber latex




Cardiac Science, Powerheart, the Shielded Heart logo and Rescue Ready are trademarks of ZOLL Medical Corporation.

Copyright © 2024 ZOLL Medical Corporation.


All Rights Reserved.




HOW TO APPLY PADS

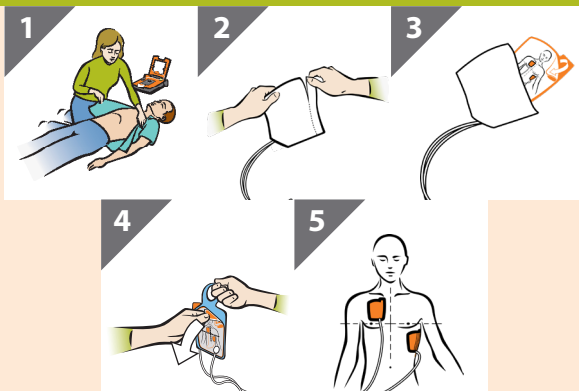

HOW TO USE THE CPR DEVICE

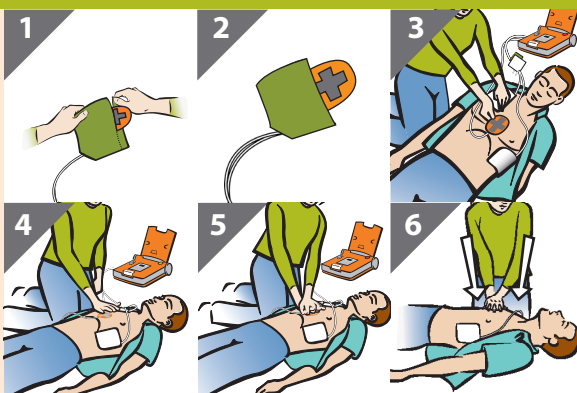

HOW TO REPLACE PADS

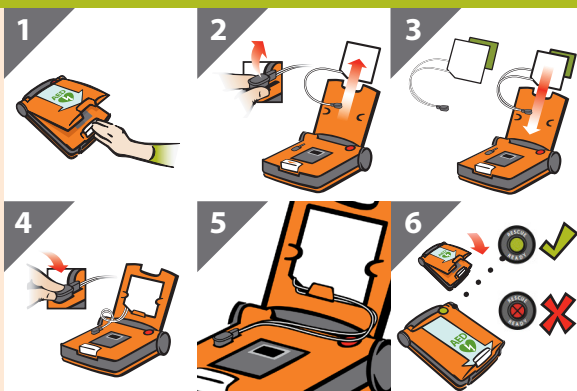

NÁVOD K POUŽITÍ

Zamýšlený účel:

Přenos energie pro defibrilační terapii srdce a poskytování asistence/zpětné vazby během KPR.

Defibrilační elektrody s přípravkem pro srdeční masáž

Defibrilační elektrody Cardiac Science® používejte s defibrilátorem Powerheart® G5 AED pro pohotovostní zásah při náhlé srdeční zástavě. Defibrilátor automaticky rozpozná připojené elektrody a nastaví maximální energii výboje.



- Pro pacienty starší než 8 let a těžší než 25 kg
- Určeno pro krátkodobé použití (<8 hod)
- Použitelné do data expirace uvedeného na obalu.
- Defibrilátor automaticky přečte datum expirace elektrod a upozorní uživatele na prošlé elektrody.



VAROVÁNÍ! Elektrody nepoužívejte opakovaně.

Opakované používání elektrod může způsobit popálení pokožky, nesprávné fungování defibrilátoru nebo přenos kontaminace mezi pacienty.



NEOTEVÍREJTE až do doby těsně před použitím.

NEPOUŽÍVEJTE poškozené elektrody.

Modrý plast je třeba úplně odstranit, jinak může být ovlivněn léčebný zásah.

Před použitím zkontrolujte kabel a konektory, zda nejsou poškozené.

NENATAHUJTE dráty svodů při odstraňování modrého plastu z elektrody.

Není určeno pro použití při kardiostimulaci.



Umístění elektrod:

Elektrodu umístěte alespoň 2,5 cm od jakéhokoli implantovaného přípravku.

Před aplikací musí být pokožka pacienta čistá a suchá.



Vyrobeno pro:

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105
www.zoll.com



ZOLL International Holding B.V.
Einsteinweg 8A
6662 PW Elst
Netherlands



Čeština

Patenty čekající na vyřízení.

Kompletní seznam amerických a jiných patentů najdete na www.zoll.com/patents.



32°F
0°C




Vyrobeno bez obsahu
přírodního latexu

Cardiac Science, Powerheart, Shielded Heart logo a Rescue Ready jsou obchodní značky společnosti ZOLL Medical Corporation.

Copyright © 2024 ZOLL Medical Corporation.

Všechna práva vyhrazena.



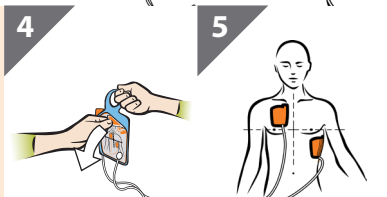

NÁVOD NA POUŽITIE

Zamýšľaný účel:

Na prenos energie na defibrilačnú terapiu do srdca a na poskytovanie pomoci/spätnej väzby pri KPR.

Defibrilačné samolepiace elektródy pre zariadenie na KPR

Samolepiace defibrilačné elektródy® Cardiac Science sa používajú s defibrilátorom Powerheart® G5 AED na núdzové ošetrenie náhlejšť zástavy srdca. Defibrilátor AED automaticky identifikuje samolepiace elektródy pripojené k nemu a nastaví maximálnu energiu výbojov.

- Pre pacientov starších ako 8 rokov a s hmotnosťou nad 25 kg (55 libier)
- Určené na krátkodobé použitie (< 8 hod.)
- Použite do uplynutia dátumu expirácie uvedenom na obale.
- Defibrilátor AED automaticky zisťuje dátum expirácie samolepiacich elektród a v prípade expirácie elektród upozorní používateľa.



VAROVANIE! Samolepiace elektródy nepoužívajte opakovane. Opätovné použitie samolepiacich elektród by mohlo spôsobiť popáleniny, nesprávny výkon defibrilátora AED alebo vzájomnú kontamináciu pacientov.



OTVÁRAJTE, až keď je všetko pripravené na ich použitie.

Poškodené samolepiace elektródy **NEPOUŽÍVAJTE**.

Ak úplne neodstránite modrý plastový obal, môžete oslabiť výboje a zhoršiť tak ošetrovanie. Pred použitím skontrolujte kábel a konektory, či nie sú poškodené.

Pri odstraňovaní modrého plastového obalu zo samolepiacich elektród **NEŤHAJTE** za zvody.

Výrobok nie je určený na kardiostimuláciu.




Pri umiestňovaní samolepiacich elektród:

Samolepiacu elektródu umiestnite vo vzdialenosti najmenej 2,5 cm od akejkoľvek implantovanej zdravotníckej pomôcky.

Zabezpečte, aby bola pokožka pacienta pred použitím čistá a suchá.



Výrobené pre:
ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA USA
01824-4105
www.zoll.com

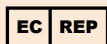

ZOLL International Holding B.V.
Einsteinweg 8A
6662 PW Elst
Netherlands



Slovenčina

Patenty čakajú na schválenie.
Úplný zoznam patentov USA
a medzinárodných patentov nájdete na stránke
www.zoll.com/patents.



32°F / 0°C — 122°F / 50°C




Pri výrobe nebol použitý
prírodný kaučukový latex


Cardiac Science, Powerheart, logo srdca so štítom a Rescue Ready sú ochranné známky spoločnosti ZOLL Medical Corporation.
Copyright © 2024 ZOLL Medical Corporation.
Všetky práva vyhradené.



SPÔSOB APLIKÁCIE SAMOLEPIACICH ELEKTROD

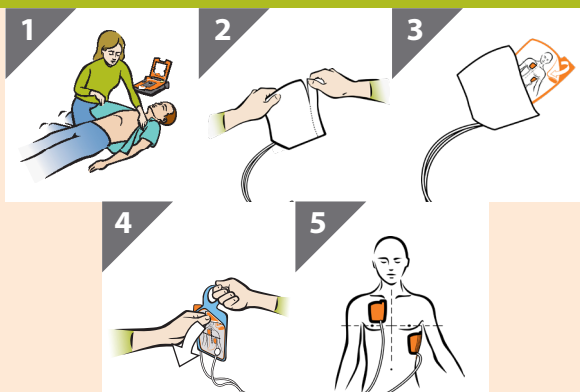

SPÔSOB POUŽÍVANIA ZARIADENIA NA KPR

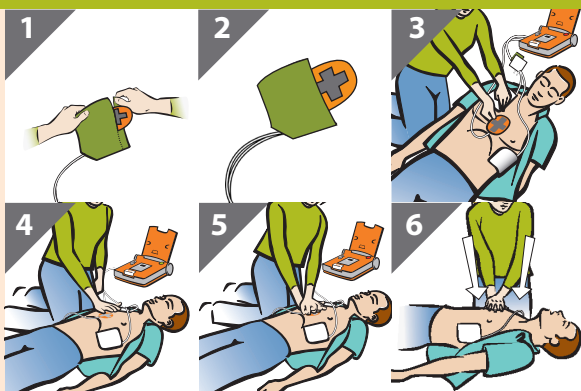

SPÔSOB VÝMENY SAMOLEPIACICH ELEKTROD

