

INSTRUCTIONS FOR USE

Pediatric Defibrillation Pads

Use with Cardiac Science® Powerheart® G5 AED for emergency treatment of sudden cardiac arrest.

The AED automatically identifies electrode pads connected to it and adjusts the maximum shock energy.

- For children up to 8 years of age or up to 55lbs (25kg)
- If child appears older or heavier, use non-pediatric defibrillation pads. Do not delay treatment to determine child's exact age/weight.
- Intended for short-term use (<8 hrs)
- Use before expiration date listed on package.
- The AED automatically reads the expiration date of the electrode pads, and notifies the user of expired pads.



WARNING! Do not reuse pads.

Reuse of pads may result in skin burns, improper AED performance or patient-to-patient contamination.



DO NOT open until ready to use.

DO NOT use damaged pads.

Failure to remove blue plastic completely could impact therapy delivery. Before use, check cable and connectors for damage.

DO NOT pull on the lead wires to separate the pads from the blue plastic.

Not intended for use in pacing.



WARNING! Not for adult use.

Pediatric defibrillation pads are for use only with children 8 years of age or younger, or 55lbs (25kg) or lighter.

When placing pads:



Place the pad at least an inch from any implanted device.

Ensure patient's skin is clean and dry before use.



Manufactured for:

Cardiac Science Corporation
500 Burdick Parkway
Deerfield, WI 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

English

Patents pending.

For a complete list of U.S. and foreign patents, see www.cardiacscience.com.



Not made with
natural rubber latex



2797




Cardiac Science, Powerheart, the Shielded Heart logo and Rescue Ready are trademarks of Cardiac Science Corporation.

Copyright © 2021 Cardiac Science Corporation.


All Rights Reserved.



INSTALL PEDIATRIC PADS

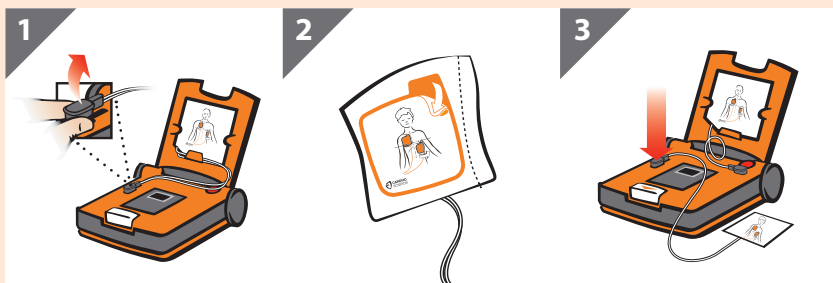


HOW TO APPLY PADS

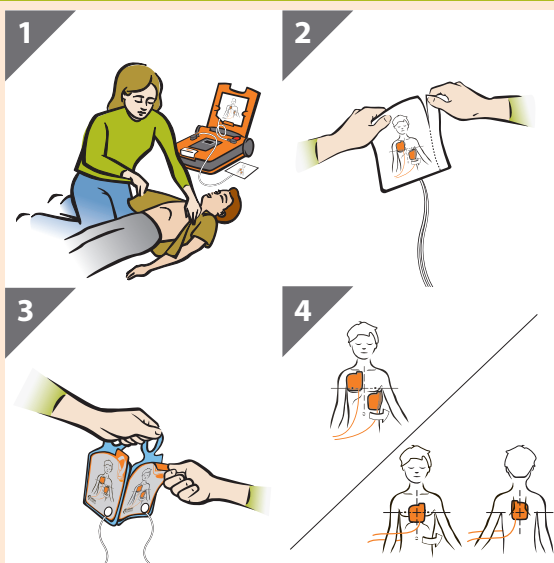

AFTER THE RESCUE

RECONNECTING THE NON-PEDIATRIC PADS

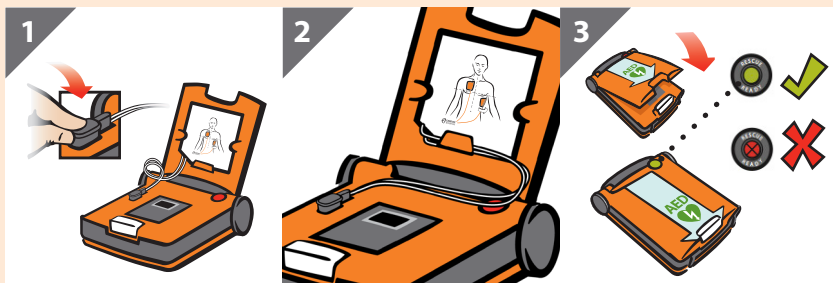

NÁVOD K POUŽITÍ

Dětské defibrilační elektrody

Používejte s defibrilátorem Cardiac Science® Powerheart® G5 AED pro pohotovostní zásah při náhlé srdeční zástavě.

Defibrilátor automaticky rozpozná připojené elektrody a nastaví maximální energii výboje.

- Pro děti do 8 let a 25 kg
- Jestliže se dítě zdá být starší nebo těžší, použijte defibrilační elektrody pro dospělé. Nezdržujte se při zákroku s určováním přesného věku/hmotnosti dítěte.
- Určeno pro krátkodobé použití (<8 hod)
- Použitelné do data expirace uvedeného na obalu.
- Defibrilátor automaticky přečte datum expirace elektrod a upozorní uživatele na prošlé elektrody.



VAROVÁNÍ! Elektrody nepoužívejte opakovaně.

Opakované používání elektrod může způsobit popálení pokožky, nesprávné fungování defibrilátoru nebo přenos kontaminace mezi pacienty.



NEOTEVÍREJTE až do doby těsně před použitím.

NEPOUŽÍVEJTE poškozené elektrody.

Modrý plast je třeba úplně odstranit, jinak může být ovlivněn léčebný zásah. Před použitím zkontrolujte kabel a konektory, zda nejsou poškozené.

NENATAHUJTE dráty svodů při odstraňování modrého plastu z elektrody.

Není určeno pro použití při kardiostimulaci.



VAROVÁNÍ! Není určeno pro dospělé.

Dětské defibrilační elektrody jsou určeny pro použití pouze pro děti do věku 8 let nebo 25 kg.



Umístění elektrod:

Elektrodu umístěte alespoň 2,5 cm od jakéhokoli implantovaného přípravku.

Před aplikací musí být pokožka pacienta čistá a suchá.



Vyrobeno pro:
Cardiac Science Corporation
500 Burdick Parkway
Deerfield, WI 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Německo

Čeština

Patenty čekající na vyřízení.
Kompletní seznam amerických a jiných patentů
najdete na www.cardiacscience.com.




2797

Vyrobeno bez obsahu
přírodního latexu


Cardiac Science, Powerheart, Shielded Heart logo a Rescue Ready
jsou obchodní značky společnosti Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2021 Cardiac Science Corporation.
Všechna práva vyhrazena.



INSTALACE DĚTSKÝCH ELEKTROD

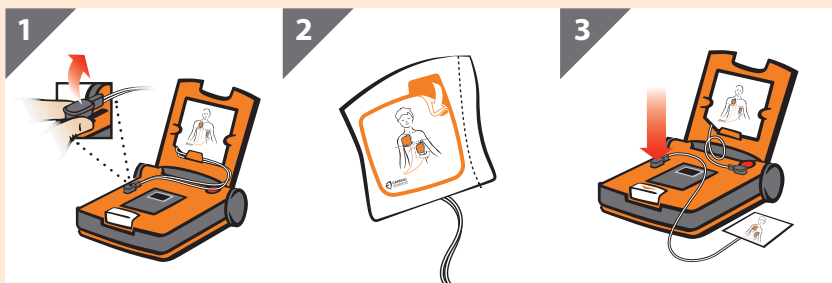


JAK PŘILOŽIT ELEKTRODY

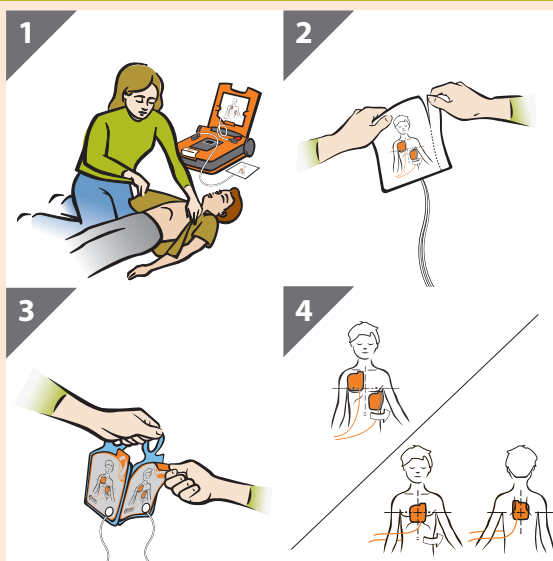

PO ZÁSAHU

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ELEKTROD PRO DOSPĚLÉ

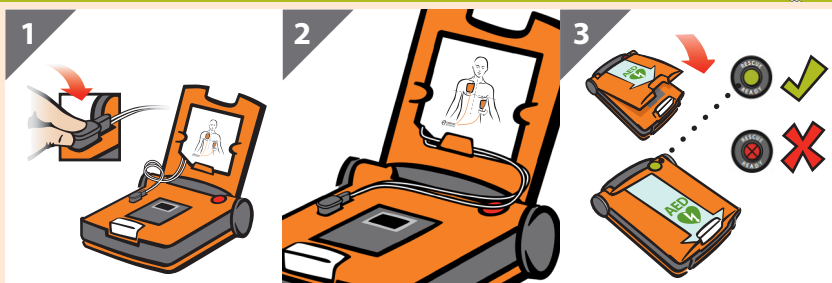

NÁVOD NA POUŽITIE

Pediatrické defibrilačné samolepiace elektródy

Používajú sa s defibrilátorom® Powerheart® G5 AED od spoločnosti Cardiac Science na núdzové ošetrovanie náhlej zástavy srdca.

Defibrilátor AED automaticky identifikuje samolepiace elektródy pripojené k nemu a nastaví maximálnu energiu výbojov.

- Pre deti do 8 rokov alebo 25 kg (55 libier).
- Ak dieťa vyzerá staršie alebo ťažšie, použite nepediatrické defibrilačné samolepiace elektródy. Neodkladajte ošetrovanie len na to, aby ste zistili presný vek/hmotnosť dieťaťa.
- Určené na krátkodobé použitie (< 8 hod.).
- Použite do uplynutia dátumu expirácie uvedenom na obale.
- Defibrilátor AED automaticky zisťuje dátum expirácie samolepiacich elektród a v prípade expirácie elektród upozorní používateľa.



VAROVANIE! Samolepiace elektródy nepoužívajte opakovane.

Opätovné použitie samolepiacich elektród by mohlo spôsobiť popáleniny, nesprávny výkon defibrilátora AED alebo vzájomnú kontamináciu pacientov.



OTVÁRAJTE, až keď je všetko pripravené na ich použitie.

Poškodené samolepiace elektródy **NEPOUŽÍVAJTE.**

Ak úplne neodstránite modrý plastový obal, môžete oslabiť výboje a zhoršiť tak ošetrovanie. Pred použitím skontrolujte kábel a konektory, či nie sú poškodené.

Pri odstraňovaní modrého plastového obalu zo samolepiacich elektród **NEŤAHAJTE** za zvody.

Výrobok nie je určený na kardiostimuláciu.



VAROVANIE! Výrobok nie je určený na použitie u dospelých.

Pediatrické defibrilačné samolepiace elektródy sú určené iba pre deti do 8 rokov alebo 25 kg (55 libier).

Pri umiestňovaní samolepiacich elektród:




Samolepiacu elektródu umiestnite vo vzdialenosti najmenej 2,5 cm od akejkoľvek implantovanej zdravotníckej pomôcky.

Zabezpečte, aby bola pokožka pacienta pred použitím čistá a suchá.



Výrobené pre:

Cardiac Science Corporation
500 Burdick Parkway
Deerfield, WI 53531 USA
www.cardiacscience.com

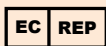

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Nemecko

Slovenčina

Patenty čakajú na schválenie.

Úplný zoznam patentov USA a medzinárodných patentov nájdete na stránke www.cardiacscience.com.



32°F
0°C



2797

Pri výrobe nebol použitý
prírodný kaučukový latex


Cardiac Science, Powerheart, logo srdca so štítom a Rescue Ready sú ochranné známky spoločnosti Cardiac Science Corporation.

Copyright © 2021 Cardiac Science Corporation.


Všetky práva vyhradené.



INŠTALÁCIA PEDIATRICKÝCH SAMOLEPIACICH ELEKTROD

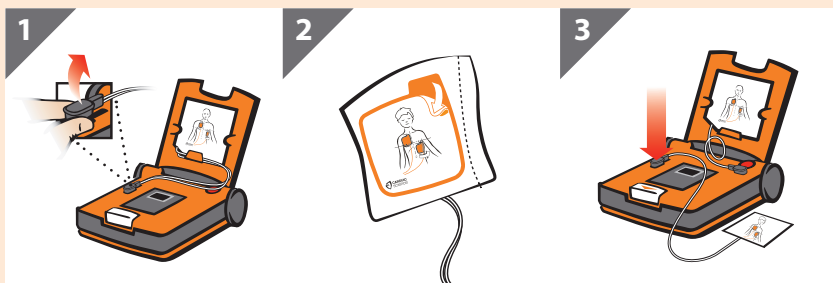

SPÔSOB APLIKÁCIE SAMOLEPIACICH ELEKTROD

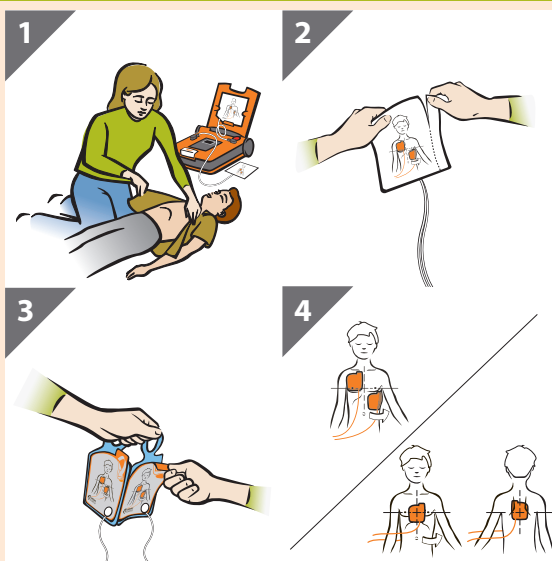

PO VYKONANÍ ZÁCHRANY

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE NEPEDIATRICKÝCH SAMOLEPIACICH ELEKTROD

