



Souprava nebulizátoru PRO Breathe

Návod k použití

pro-breathe™

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE

Výrobek slouží k aerosolizaci a podávání léčivých přípravků do respiračního systému pacienta. Musí být připojen k plynovému kompresoru nebulizačního systému nebo přívodu medicínálního plynu. Používat jej má výhradně kvalifikovaný zdravotnický personál, a to pouze u pediatrických a dospělých pacientů.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže nebyl léčivý přípravek v nebulizátoru dostatečně aerosolizován, existuje riziko, že pacient nebude přípravek odpovídajícím způsobem absorbovat. Následkem nedostatečné aerosolizace mohou částice kapaliny vniknout do dýchacích cest pacienta a vyvolat dušení. V závislosti na použitém léčivém přípravku hrozí zvýšené riziko případných nežádoucích účinků a/nebo předávkování. Aerosolizovaný přípravek může rovněž do jisté míry podráždit ústa, nos a hrdlo pacienta.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte všechna upozornění a pokyny. Nesprávné použití může vést k vážnému či fatálnímu onemocnění nebo zranění. Tento zdravotnický prostředek mají používat výhradně kvalifikovaní odborní pracovníci. Veškeré závažné příhody, k nimž v souvislosti s prostředkem došlo, je třeba nahlásit výrobci a kontrolnímu úřadu v místě působení uživatele.

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou ventily, konektory a hadičky zdravotnického prostředku ohnuté, vadné nebo poškozené. Pokud zjistíte jakýkoli problém, prostředek nepoužívejte.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Zdravotnický prostředek je určen k jednorázovému použití. Nepoužívejte jej, nezpracováváte ani nesterilizujte opakovaně. S opakovaným použitím zdravotnických prostředků určených k jednorázovému použití souvisí riziko přenosu infekce mezi pacienty. Opakované použití těchto prostředků může ohrozit integritu, funkčnost nebo klinickou účinnost prostředku.
- Výrobek a obal zlikvidujte v souladu se směrnicemi nemocnice a místními či regionálními nařízeními a zákony.
- Při použití prostředku u dětí a pacientů s fyzickou nebo duševní poruchou či v jejich blízkosti je nutný pozorný dohled. Prostředek nepoužívejte, pokud pacient spí nebo je ospalý.
- Před použitím se přesvědčte, zda je nebulizátor řádně sestaven. Všechny jeho součásti musí být na svém místě a správně upevněny.
- Použití nesprávně sestaveného nebulizátoru by mohlo znesnadnit příslušné podání léčivého přípravku a omezit účinnost léčby nebo je zcela znemožnit.
- Pokud má pacient nepříjemné pocity nebo potíže s dýcháním, ihned přestaňte zdravotnický prostředek používat a uveďte zdravotnického pracovníka.
- Nebulizační nádobku nenaklánějte pod úhlem větším než 45 stupňů. Léčivý přípravek totiž začne z nádobky vytékat a ovlivní tak správnou funkci nebulizátoru.
- Tento výrobek obsahuje bis(2 ethylhexyl) ftalát (DEHP). DEHP je podle klasifikace Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) karcinogenem skupiny 2B. Tato chemická látka může způsobovat vývojovou toxicitu, reprodukční toxicitu u mužů a chronickou hepatotoxicitu. Používá-li se podle indikace, expozice stopovému množství DEHP bude velice omezená. K dispozici nejsou žádné přesvědčivé klinické důkazy o tom, že by tento stupeň expozice zvyšoval klinické riziko. Aby se však toto riziko snížilo na minimum, děti, těhotné ženy a kojící ženy se mají používat výrobků obsahujících DEHP vyhnout.

POKyny PRO POUŽITÍ

Tyto pokyny jsou návodem k použití, jenž je určen pro kvalifikované odborné pracovníky. Uvedené instrukce ani kontraindikace nejsou vyčerpávající; je odpovědností klinického lékaře, aby zajistil bezpečné, řádné použití tohoto výrobku.

- Vložte předepsaný léčivý přípravek do nebulizační nádobky.
- Opatrně uzavřete nádobku víčkem a přesvědčte se, že víčko dobře těsní.
- Připojte jeden konec přívodní hadičky k malému trnu na dně nebulizátoru.
- K nebulizátoru připevněte T konektor a náustek.
- Připojte druhý konec přívodní hadičky ke zvolenému zdroji tlaku.
- V souladu se směrnicemi nemocnice nastavte proudění kyslíku na příslušnou průtokovou rychlost.
- Zkontrolujte, zda kyslík prochází zdravotnickým prostředkem.
- Nasaďte masku pacientovi na obličej a elastický pásek mu veďte pod ušima a kolem krku.
- Šetrně táhněte za konce pásku, dokud maska bezpečně nesedí.
- Opatrně upravte tvar kovového proužku na masce, aby pacientovi dobře doléhal na nos.

PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

- Uchovávejte na tmavém, chladném a suchém místě.
- Teplota: 15 °C až 49 °C.
- Vlhkost: < 90 %.
- Chraňte výrobek před vlhkostí a nadměrným teplem.
- Zabraňte delšímu vystavení ultrafialovému, slunečnímu a fluorescenčnímu světlu.
- Uchovávejte vhodným způsobem, aby nedošlo k rozdrčení výrobku.




Distributor ČR:
BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10,
102 00 Praha 10 – Hostivař,
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: leden 2025

Medical Device Imported and Distributed by:

PROACT Medical Ltd

9-13 Oakley Hay Lodge, Great Folds Road,
Oakley Hay Business Park
Corby, Northants, NN18 9AS, UK
Tel: +44 (0)1536 461981 E-mail: sales@proactmedical.co.uk

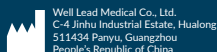

Distribué par:

PROACT Medical SAS

E-mail: ventes@proactmedical.fr

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80
20537 Hamburg
Germany

